

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Monitor płodu Team3

Powiadomienie dotyczy produktu:

Nazwa(y) produktu:	TEAM3A & TEAM3I
Numery seryjne, których dotyczy problem:	Wszystkie
Kody zamówień/identyfikatorów (DI):	Zobacz załącznik 1 z lista wszystkich wariantów
Produkt pierwszy raz sprzedany :	Październik 2016 r
GMDN:	37796
EMDN:	Z12080101
SRN:	SE-MF-00000696
Podstawowy kod UDI-DI:	5060693520389WY
510k/numer rozliczenia:	K200975/D410520
Numer licencji HC:	104905 (przed porodem) i 104907 (podczas porodu)
Identyfikator ARTG:	116216
Rozwiązanie problemu :	Instalacja nowego oprogramowania (wersja 19.4) na wszystkie urządzenia Team3A & Team3I
Numer stron:	15 włącznie z formularzem deklaracji

Kogo to może dotyczyć;

Kontaktujemy się z Państwem, aby przekazać informacje dotyczące działań korygujących rozstrzygnięcia problemów z urządzeniami Team3A i Team3I.

Opis problemu;

Firma Huntleigh Healthcare Ltd wykryła problem w oprogramowaniu, który objawiał się zawieszaniem ekranu dotykowego. To zawieszenie wyłącza funkcje wyświetlane na monitorze. Chociaż występowanie tego problemu jest niezwykle rzadkie, oraz dźwięk pozostaje obecny podczas zamrożenia ekranu, ponowne uruchomienie wymaga interwencji użytkownika.

Podjęciem opartym na ryzyku;

W wyniku rozmów z medycznymi władzami Wielkiej Brytanii (MHRA) uzgodniono, że interwencja użytkownika nie będzie konieczna jeżeli monitor zostanie automatycznie uruchomiony, w przypadku gdy urządzenie wykryje jakąkolwiek utratę zasilania lub zakłócenia. Automatyczne uruchomienie przywróci wszystkie funkcje i ustawienia. Ponownie uruchomienie pojawi się jako normalne działanie WŁ./WYŁ. i zajmie około 20 sekund od początku do końca z tym działaniem odnotowanym na zapisie KTG oraz notatką na ekranie dotykowym.

Należy pamiętać, że analiza Dawes Redman KTG zostanie zresetowana do początku analizy po automatycznym uruchomieniu systemu.

Działania, które powinien podjąć Użytkownik i/lub Dystrybutor;

Aktualizacja oprogramowania – V19.4 – musi być zainstalowana na monitorach TEAM3 wymienionych w Załączniku 1. To oprogramowanie będzie dostępne do pobrania na stronie internetowej Huntleigh Healthcare (<https://www.huntleigh-diagnostics.com/Team3Upgrade19.4>) wraz ze szczegółową instrukcją instalacji oprogramowania. Załącznik 2 zawiera również instrukcje dotyczące pobierania i instalacji oprogramowania.

Po zakończeniu aktualizacji na wszystkich urządzeniach w Państwa placówce prosimy o odesłanie wypełnionej Deklaracji (patrz Załącznik 3) na adres mailowy:

FSN01-23HHL@Arjo.com.

Przekazywanie tych informacji;

Prosimy upewnić się, że niniejsze powiadomienie zostało rozesłane do wszystkich odpowiednich pracowników.

Bezpieczeństwo pacjentów i zadowolenie klientów są dla Huntleigh Healthcare Ltd sprawą najwyższej wagi i przepraszamy za wszelkie utrudnienia i komplikacje, jakie spowoduje to zawiadomienie.

FSN01-23

Data: 3 kwietnia 2023r

HUNTLEIGH

A MEMBER OF THE ARJO FAMILY

Kontakt

W razie potrzeby prosimy o kontakt z następującym personelem:

Formularz deklaracji należy przesać na adres e-mail: FSN01-23HHL@Arjo.com

Dyrektor QRE	E-mail: steve.monks@arjo.com	Tel: +44 (0) 2920485885 Wew: 7107
Specjalista ds. Reklamacji	E-mail: michael.James@arjo.com	Tel: +44 (0) 2920485885 Wew: 7016
Kierownik serwisu	E-mail: gary.newton@arjo.com	Tel: +44 (0) 2920485885 Wew: 7112
Zarządzanie produktem	E-mail: David.dobbs@arjo.com	Tel: +44 (0) 2920485885

Z poważaniem,



Mike Thompson
Dyrektor Zarządzający



Steve Monks
QRE Dyrektor

Dokument Wprowadzenie/Rewizja Historia

Rewizja	Data	Opis	Opisane przez
1	03.04.2023	Wprowadzenie FSN.	S. Monks

Załącznik 1

Lista produktów, których dotyczy zawiadomienie dotyczące bezpieczeństwa

Nazwa	Opis	Identyfikator urządzenia
OBIX IM2	TEAM3 PODCZASPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+SPO2+EMHR-TWINS	05051968041234
OBIX IM3	TEAM3 PODCZASPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+SPO2+EMHR-TRIPLETS	05051968040985
TEAM3A	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA	05051968032485
TEAM3A 3	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA-TROJACZKI	05051968035196
TEAM3A B	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA + BATERIE	05051968032492
TEAM3A E	PRZEDPORODOWA/EKG	05051968032508
TEAM3A N	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA+NIBP	05051968032522
TEAM3A S	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA+SPO2	05051968032560
TEAM3A B3	PRZEDPORODOWA /PRT+BATERIE-TROJACZKI	05051968035202
TEAM3A E3	PRZEDPORODOWA/ECTG-TROJACZKI	05051968035219
TEAM3A EB	PRZEDPORODOWA/ECTG+BAT	05051968032515
TEAM3A ENS	TEAM3 PRZEDPORODOWA + NIBP + SPO2, BRAK DRUKARKI	05051968039842
TEAM3A N3	PRZEDPORODOWA/PRT+NIBP-TROJACZKI	05051968035233
TEAM3A NB	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+BAT	05051968032539
TEAM3A NS	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+SPO2	05051968032546
TEAM3A S3	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA+SPO2- TROJACZKI	05051968035271
TEAM3A SB	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA+SPO2+BAT	05051968032577
TEAM3A EB3	PRZEDPORODOWA/ECTG+BAT- TROJACZKI	05051968035226
TEAM3A NB3	PRZEDPORODOWA/PRT+NIBP+BAT- TROJACZKI	05051968035240
TEAM3A NS3	PRZEDPORODOWA/PRT+NIBP+SPO2- TROJACZKI	05051968035257
TEAM3A NSB	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+SPO2+BAT	05051968032553
TEAM3A SB3	PRZEDPORODOWA/PRT+SPO2+BAT- TROJACZKI	05051968035288
TEAM3A ENSB	TEAM3 PRZEDPORODOWA + NIBP + SPO2 + BATERIA, BEZ DRUKARKI	05051968039859
TEAM3A NSB3	PRZEDPORODOWA/PRT+NIBP+SPO2+BAT- TROJACZKI	05051968035264
TEAM3G1	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA/PODSTAWOWA/POJEDYNCZA	05051968033192
TEAM3G1-ECTG	PRZEDPORODOWA/ECTG/PODSTAWOWA/POJEDYNCZA	05051968033208
TEAM3G2	ZESPÓŁ 3A PODSTAWOWY	05051968033093
TEAM3G2-ECTG	ZESPÓŁ 3A EKG PODSTAWOWE	05051968033109
TEAM3I	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA	05051968032584
TEAM3I 3	PODCZASPORODOWA/PRINTER-TRIPLETS	05051968035295
TEAM3I B	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA + AKUMULATOR	05051968032591
TEAM3I N	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA+NIBP	05051968032997
TEAM3I S	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA+SPO2	05051968033017
TEAM3I B3	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA+BAT- TROJACZKI	05051968035301

Nazwa	Opis	Identyfikator urządzenia
TEAM3I N3	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA +NIBP-TROJACZKI	05051968035318
TEAM3I NB	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA + NIBP + BATTERY	05051968033000
TEAM3I NS	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA+NIBP+SPO2	05051968033031
TEAM3I S3	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA+SPO2-TROJACZKI	05051968035356
TEAM3I SB	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA+SPO2+BATERIA	05051968033024
TEAM3I NB3	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+BAT-TROJACZKI	05051968035325
TEAM3I NS3	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+SPO2-TROJAZCKI	05051968035332
TEAM3I NSB	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+SPO2+BAT	05051968032980
TEAM3I SB3	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA+SPO2+BAT-TROJACZKI	05051968035363
TEAM3I NSB3	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+SOP2+BAT-TRI	05051968035349
TEAM3A ENM	PRZEDPORODOWA/ECTG+NIBP+SPO2NEL	05051968041920
TEAM3A NM	PRZEDPORODOWA/DRUKUJ+NIBP+SPO2NEL	05051968041937
TEAM3A NM3	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA+SPO2NEL-TROJACZKI	05051968041944
TEAM3A NMB	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA +NIBP+SPO2NEL+BAT	05051968041951
TEAM3A NMB3	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA +NIBP+SPO2NEL+BAT-TROJ	05051968041968
TEAM3A M	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA +SPO2NEL	05051968041975
TEAM3A MB	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA +SPO2NEL+BAT	05051968041982
TEAM3I NM	PODCZASPORODOWA/DRUKUJ+NIBP+SPO2NEL	05051968041999
TEAM3I NM3	SP-777232 PŁYTA EKРАНU ANALOGOWEGO	05051968042002
TEAM3I NMB	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+SPO2NEL+BAT	05051968042019
TEAM3I NMB3	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+SPO2NEL+BAT-TROJACZKI	05051968042026
TEAM3I M	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA+SPO2NEL	05051968042033
TEAM3I MB	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA+SPO2NEL+BAT	05051968042040
TEAM3I ENSB	TEAM3 PODCZASPORODU/ECTG+NIBP+SPO2+BAT	05051968042064
OBIX AM2N	PRZEDPORODOWE - BLIŻNIAKI	05051968042071
OBIX IM2 D	PODCZASPORODOWA /NIBP+SPO2+EMHR+DVI-BLIŻNIAKI	05051968042972
TEAM3A-USA ENM	PRZEDPORODOWA /ECTG+NIBP+SPO2NEL	05051968042989
TEAM3A-USA NM	PRZEDPORODOWA /DRUKARKA+NIBP+SPO2NEL	05051968042996
TEAM3A-USA NM3	PRZEDPORODOWA /DRUKARKA +NIBP+SPO2NEL-TROJACZKI	05051968043009
TEAM3A-USA NMB	PRZEDPORODOWA /DRUKARKA +NIBP+SPO2NEL+BAT	05051968043016
TEAM3A-USA NMB3	PRZEDPORODOWA /DRUKARKA +NIBP+SPO2NEL+BAT-TROJ	05051968043023
TEAM3A-USA M	PRZEDPORODOWA /DRUKARKA +SPO2NEL	05051968043030
TEAM3A-USA MB	PRZEDPORODOWA /DRUKARKA +SPO2NEL+BAT	05051968043047
TEAM3I-USA NM	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA +NIBP+SPO2NEL	05051968043054
TEAM3I-USA NM3	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA +NIBP+SPO2NEL-TROJACZKI	05051968043061
TEAM3I-USA NMB	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA +NIBP+SPO2NEL+BAT	05051968043078
TEAM3I-USA NMB3	PODCZASPORODOWA/DRUKARKA +NIBP+SPO2NEL+BAT-TRIP	05051968043085
TEAM3I-USA M	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA +SPO2NEL	05051968043092
TEAM3I-USA MB	PODCZASPORODOWA /DRUKARKA +SPO2NEL+BAT	05051968043108
OBIX IM2 B	PODCZASPORODOWA /NIBP+SPO2+EMHR+BATT-TWIN	05051968043412

Nazwa	Opis	Identyfikator urządzenia
TEAM3I E	ZESPÓŁ 3 ŚRÓDPORODOWY/EKG	05051968044013
TEAM3A-USA EN	PRZEDPORODOWA /ECTG+NIBP USA	05051968044020
TEAM3A-USA ENB	PRZEDPORODOWA /ECTG+NIBP+BAT USA	05051968044037
TEAM3A-USA	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA USA	05051968044242
TEAM3A-B-USA	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA+BATERIA USA	05051968044259
TEAM3A-E-USA	PRZEDPORODOWA/ECTG USA	05051968044266
TEAM3A-EB-USA	PRZEDPORODOWA/ECTG+BATERIA USA	05051968044273
TEAM3A-EN-USA	PRZEDPORODOWA/ECTG+NIBP USA	05051968044280
TEAM3A-ENB-USA	PRZEDPORODOWA/ECTG+NIBP+BATERIA USA	05051968044297
TEAM3A-N-USA	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA+NIBP USA	05051968044303
TEAM3A-NB-USA	PRZEDPORODOWA/DRUKARKA+NIBP+BATERIA USA	05051968044310

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Zawartość

Działania, które powinien podjąć Użytkownik i/lub Dystrybutor;.....	2
Kontakt	3
Monitorowanie instalacji aktualizacji Team3 V19.4.....	8
Cel i zakres	8
Uzyskaj i zainstaluj pakiet aktualizacyjny Team3 V19.4	8
Pobierz narzędzie do monitorowania instalacji aktualizacji Team3 V19.4	8
Zainstaluj narzędzie do monitorowania instalacji aktualizacji Team3 V19.4	8
Utwórz pamięć USB z aktualizacją Team3 V19.4	9
Wybierz odpowiedni nośnik USB	9
Zapisz pliki aktualizacji na USB	9
Zaktualizuj jednostki Team3 do wersji 19.4	10
Identyfikacja procesu aktualizacji.....	10
Proces aktualizacji 1	11
Proces aktualizacji 2	11
Prześlij pliki dziennika na serwer Huntleigh	12
Rozwiązywanie problemów.....	13
Deklaracja Formularz FSN01-23	14
Do kogo zwrócić deklaracje.....	14

Monitorowanie instalacji aktualizacji Team3 V19.4

Cel i zakres

Ten dokument opisuje cały proces pobierania, instalowania i aktywowania oprogramowania V19.4, jednego lub więcej urządzeń Team3 oraz przesyłania plików dziennika na serwer Huntleigh.

Uzyskaj i zainstaluj pakiet Team3 V19.4

Pobierz oprogramowanie do instalacji Team3 V19.4

Korzystając z komputera w systemie Microsoft Windows 10 lub 11 podłączonego do Internetu, otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do następującego adresu witryny:


<https://www.huntleigh-diagnostics.com/Team3Upgrade19.4>

następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać oprogramowanie.

Uwaga: zanim pobieranie będzie dozwolone, prawdopodobnie zostanie wyświetlonych kilka ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa — zaakceptuj wszystkie ostrzeżenia, aby kontynuować pobieranie.

Zainstaluj oprogramowanie do instalacji oraz aktualizacji Team3 V19.4

Po pobraniu uruchom plik „Team3 19.4 Upgrade.exe”, aby zainstalować oprogramowanie na komputerze. Kliknij plik wykonywalny prawym przyciskiem myszy, wybierz „Uruchom jako administrator” i wprowadź informacje administratora. Zostanie wyświetlony Kreator instalacji:

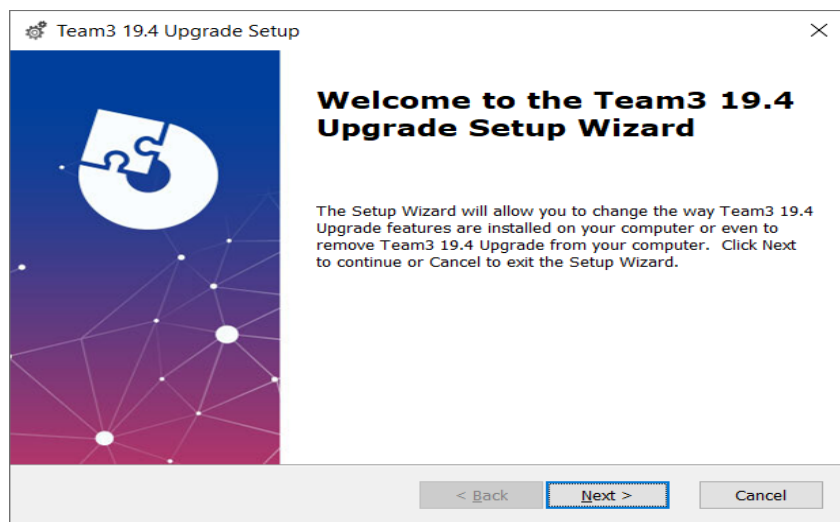

Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, aby zakończyć instalację.

Utwórz pamięć USB z aktualizacją Team3 V19.4

Wybierz odpowiedni USB


Ważne jest, aby do przeprowadzenia aktualizacji używać dobrej jakości pamięci USB. Zalecamy stosowanie nazwanej marki, takiej jak Sandisk, Transcend lub Kingston. Wybrane urządzenie musi mieć od 4 GB do 16 GB i być w stanie zmieścić się w gnieździe USB z tyłu Team3.

Zapisz pliki aktualizacji na USB

Włóż USB do dostępnego portu w komputerze. Zaleca się, ale nie jest to obowiązkowe, aby wszystkie inne urządzenia USB były odłączone podczas wykonywania tej operacji. Uruchom oprogramowanie w trybie administracyjnym poprzez:

- Kliknij menu Start systemu Windows, przewiń w dół i rozwiń ikonę folderu Huntleigh
- Kliknij prawym przyciskiem myszy „Team3UpdateTool” i otwórz opcje „Więcej”.
- Wybierz „Uruchom jako administrator” i wprowadź poświadczenia administratora


Zostanie wyświetlony następujący ekran główny. Zwróć uwagę, że przy pierwszym uruchomieniu wszystkie przyciski będą szare i niedostępne. Będzie tak do momentu wpisania prawidłowego adresu e-mail w odpowiednim polu.

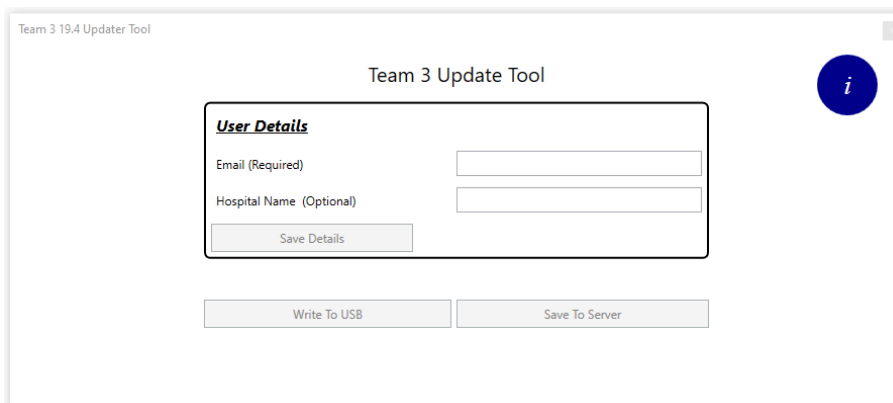

- Podaj prawidłowy adres e-mail – przycisk „Zapisz szczegóły” stanie się dostępny
- Opcjonalnie wprowadź dane szpitala i kliknij przycisk „Zapisz szczegóły”.
- Kliknij przycisk „Zapisz na USB”, który jest teraz dostępny

Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Konfiguruj urządzenie USB”, zawierające listę wszystkich urządzeń USB o odpowiednim rozmiarze podłączonych do komputera.

Wybierz odpowiednie urządzenie z listy i kliknij przycisk „Konfiguruj urządzenie USB”. Ostrzeżenie wskaże, że zawartość zostanie usunięta - kliknij „Tak”, aby potwierdzić operację. Urządzenie zostanie sformatowane do FAT32, po czym zostaną na nim zapisane pliki aktualizacji. Po pomyślnym zakończeniu do serwera Huntleigh zostanie wysłane powiadomienie informujące o utworzeniu uaktualniającej pamięci USB, o ile można nawiązać połączenie. Cały proces zajmie około minuty. Zamknij okno dialogowe i zamknij aplikację.

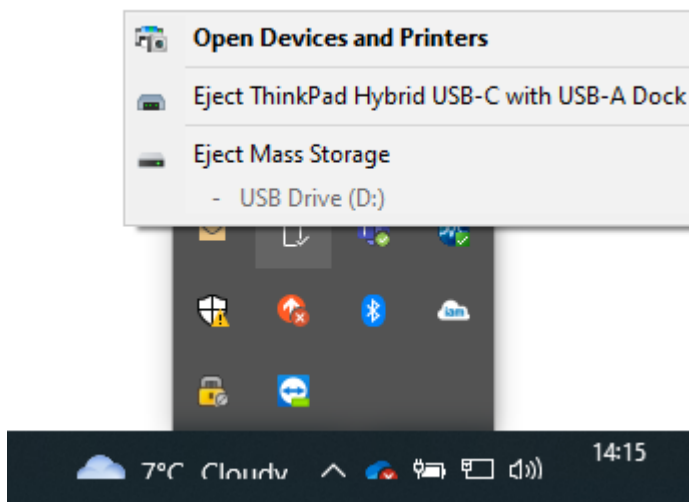

Wysuń urządzenie USB (jest to ważne) i odłącz je od komputera. Urządzenie Team3 jest teraz gotowe do aktualizacji oprogramowania do wersji 19.4

Aktualizacja urządzenia Team3 do wersji 19.4

Należy pamiętać, że wszystkie ustawienia lokalne i globalne zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych. Postępuj zgodnie z właściwą procedurą przeprowadzania aktualizacji, która została opisana poniżej:

Identyfikacja procesu aktualizacji

Jednostki Team3 przed wersją 19.1

- Włóż USB zawierającą oprogramowanie aktualizacyjne.
- Włącz urządzenie.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie
- Przejdź do „Weryfikacja aktualizacji”, aby potwierdzić zakończenie.

Jednostki Team3 w wersji 19.1 i wyższej

Urządzenie o numerach seryjnych o statusie wydania 6, (21) 777## 6 #####, użyj procesu 1.

Urządzenie o numerach seryjnych o statusie wydania 7, (21) 777## 7 #####, użyj procesu 2.

Niektóre urządzenia zostały dostarczone przed zmianą statusu, aby zidentyfikować proces aktualizacji tych urządzenia:

Włącz Team 3 i zaobserwuj:

Monitory wymagające metody aktualizacji procesu 1.

- Ekran stanie się czarny po wyświetleniu początkowego ekranu powitalnego.

Monitory wymagające metody aktualizacji procesu 2

- Ekran powitalny pozostanie wyświetlony, a pasek postępu na dole ekranu będzie wyświetlany.

Proces aktualizacji 1

- Podłącz Team3 do źródła zasilania
- Włóż USB zawierający oprogramowanie do aktualizacji.
- Włącz urządzenie.
- Gdy ekran stanie się czarny, odlicz 5 sekund.
- Naciśnij przycisk zasilania przez 5 sekund, a następnie zwolnij.
- Jeśli przycisk zostanie przytrzymany dłużej niż 5 sekund, urządzenie wyłączy się po 10 sekundach.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Proces aktualizacji 2

- Włóż USB zawierającą oprogramowanie do aktualizacji.
- Włącz urządzenie.
- Kiedy pierwszy raz pojawi się ekran powitalny odlicz 5 sekund
- Naciśnij przycisk zasilania przez 5 sekund, a następnie zwolnij.
- Jeśli przycisk zostanie przytrzymany dłużej niż 5 sekund, urządzenie wyłączy się po 10 sekundach.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Po pomyślnym zakończeniu pojawi się komunikat o wyjęciu USB, po wykonaniu tej czynności urządzenie Team3 wyłączy się. Urządzenie zostało oprogramowane do wersji 19.4.

Powtórz powyższy proces dla wszystkich urządzeń Team3, które mają zostać zaprogramowane przy użyciu tej samej pamięci USB.

Weryfikacja aktualizacji

Włącz urządzenie.

Dotknij na ekranie



Dotknij na ekranie

Secure Settings

Wprowadź hasło (12345)

Dotknij na ekranie

Version Information

Sprawdź, czy ustawienia oprogramowanego monitora są zgodne z ustawieniami wskazanymi strzałkami poniżej.

Version Information	
Component	Version
System Version	19.4
Language Version	16
Serial Number	<NO SERIAL NUMBER SET!>
Session	3459c430-580b-4141-97fb-2339b5b063ef
IP Address	127.0.0.1
Physical Address	00:E0:4B:60:A2:4F
Total On Time	2h 33m 10s [Started 3/27/2023 11:04:31 AM]
UIP	5.308.8480.27742 built 3/21/2023 3:24:44 PM
Main Board	4
Peripheral Driver	0.0.6.1
PP: Printer	0.0.5.45 N
CP: Ultrasound	0.0.01.0017
CP: FECG	0.0.00.0003
CP: MECG	0.0.00.0003
CP: ClinicalCPLD	2.5
CP: ClinicalDsp	0.0.05.0263
CP: CommsProcessor	X
CP: ClinicalHardware	Antepartum; Dsp 2; Anlg 4

Prześlij pliki na serwer Huntleigh

Wróć do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem i włóż pamięć USB do dostępnego gniazda. Ponownie uruchom aplikację „Team3UpdateTool” w trybie administracyjnym, opisaną w punkcie 3.2 powyżej. W tym i kolejnych cyklach zapisany wcześniej adres e-mail i dane szpitala zostaną uzupełnione automatycznie, a przyciski kontrolne staną się dostępne.

Kliknij przycisk „Wyślij na serwer”, aby wyświetlić okno dialogowe Wyślij na serwer.

Wybierz pamięć USB do aktualizacji z listy i kliknij przycisk „Wyślij na serwer”.


Lista Jednostek Team3 z nowym oprogramowaniem V19.4 będzie wyświetlona w oknie komunikatu. Jeśli nie można nawiązać połączenia z serwerem, spróbuj ponownie później.



Zamknij okno dialogowe oraz aplikację.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas próby zapisania plików zostanie włożona nieodpowiednia pamięć USB, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

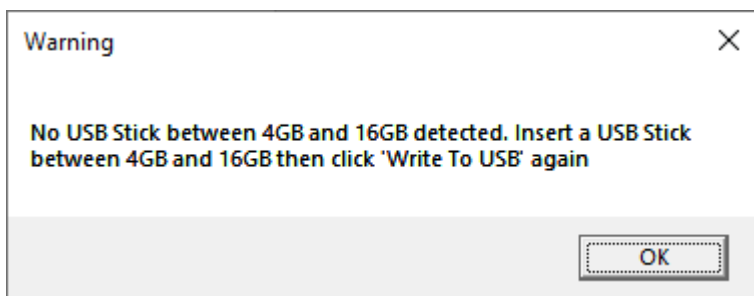

Jeśli USB zawiera pliki utworzone podczas operacji aktualizacji, podczas próby zapisania plików wyświetlany zostanie następujący komunikat:



W takim przypadku zamknij okno dialogowe, wymień USB i spróbuj ponownie.

Jeśli Team3 nie rozpocznie aktualizacji oprogramowania po wykonaniu prawidłowo określonej procedury dla modelu, upewnij się, że USB jest całkowicie włożony do jednego z portów USB (nie do portu Ethernet) i spróbuj ponownie.

Jeśli nadal nie jest wykrywany, może być wadliwy lub niezgodny. W takim przypadku wymień pamięć USB na alternatywną markę lub jedną z marek zalecanych w sekcji 3.1 .

Formularz Zgłoszenia

FSN01-23

Do uzupełnienia i przesłania
do Huntleigh na email;

[E-mail : FSN01-23HHL@Arjo.com](mailto:FSN01-23HHL@Arjo.com)

Imię i nazwisko:	
Stanowisko/zawód Tytuł:	
Obiekt Nazwa / Adres:	
E-mail:	
Tel:	

Oświadczam, że:

Oprogramowanie V19.4 zostało zainstalowane na Monitorach Płodu na następujących numerach seryjnych;

Seryjny Numer	(21)777
	Załączono kontynuację listy poniżej

Imię (WYDRUKOWAĆ): _____

Podpis: _____

Data: _____

